
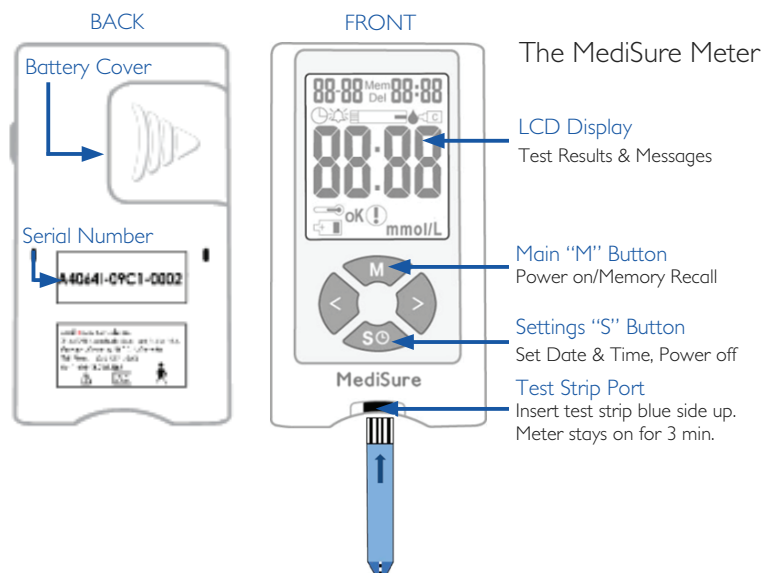


Multi User Meter (DG001MM-MULTI) QUICK START GUIDE

This Blood Glucose Monitoring System has been Licensed by Health Canada for Multi Patient Use. It is intended for use by health care professionals on multiple patients. It is certified as safe to use for over 18,000 tests and in-between cleaning protocols.


BATTERY INSTALLATION

1. Press down Battery Cover and slide right.
2. Firmly insert battery with positive (+) side up.

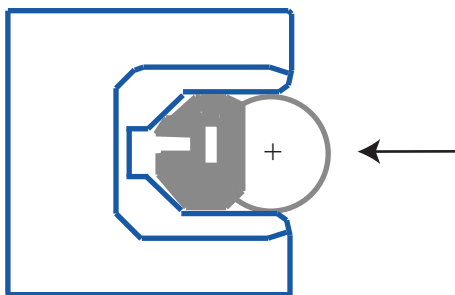

SET DATE AND TIME


1. Press and hold the "S" button for 3+ seconds
2. Year flashes. Press the ">" or "<" buttons until the correct year is displayed.
3. Press the "S" button. Month flashes in the top left. Press the ">" or "<" buttons until the correct year is displayed.
4. Repeat Step 3 for the Day, Hour (24 hours) and minutes.
5. Press the "S" button. Meter will display "SET" and turn off. Date and time is now set.

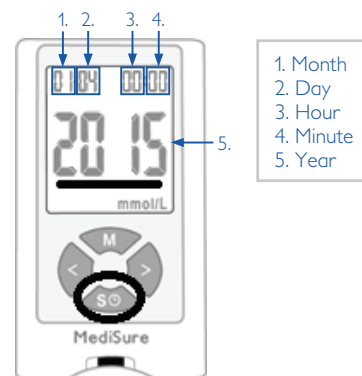


BEGIN TESTING



Wash hands with warm water and dry.

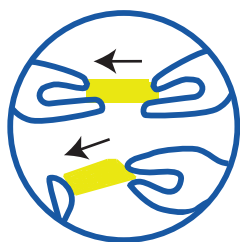


Put on Gloves and Prepare Single Use, Auto Disabling Lancet

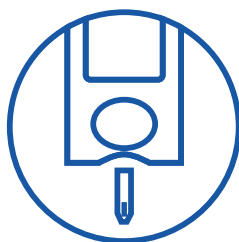

Insert MediSure test strips in meter.



Apply blood sample. Results in 6 seconds!

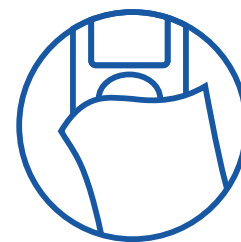

Perform In Between Cleaning Protocol after each use

VIEW TEST RESULTS

1. Press the "M" button to turn on the meter. Press the "M" button again.
2. Last test results are displayed. Press "<" and ">" button to toggle results.
3. Press "M" button a third time to see 7, 14, 21, and 28 day averages.
4. Press "S" button to turn off Meter





Follow usage Instructions carefully. Use only with an auto-disabling, single use lancing device. A new pair of clean gloves should be worn by the user before testing each patient.. Carefully follow cleaning and disinfection protocols between each use

Modèle Multi-Usagers (DG001MM-MULTI) GUIDE RAPIDE DE DÉPART

Ce système de surveillance de la glycémie a été homologué par Santé Canada pour une utilisation multi-patients. Il est destiné à être utilisé par des professionnels de la santé sur plusieurs patients. Il est certifié comme sûr à utiliser pour plus de 18 000 tests et protocoles de nettoyage intermédiaires.

Installation de la Batterie


1. Appuyez sur le couvercle de la pile et faites glisser vers la droite.
2. Insérez fermement une nouvelle pile, le côté positif (+) vers le haut.

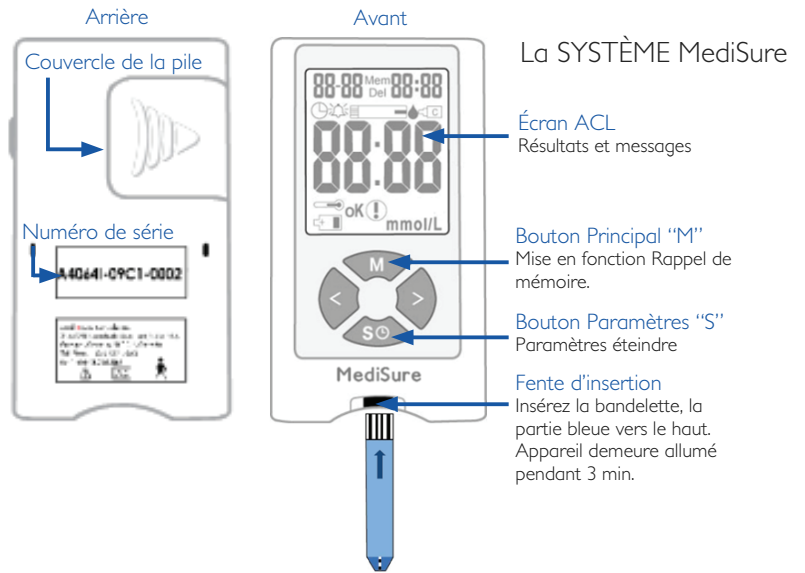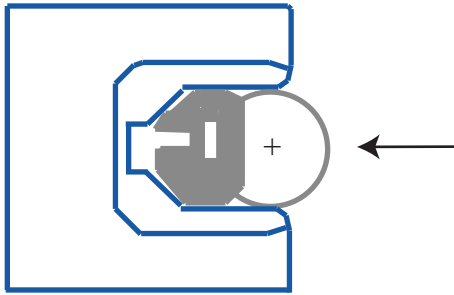

Ajustement de la date et de l'heure

1. Appuyez et maintenez le bouton « S » durant environ 3 secondes.
2. L'année clignotera à l'écran. Appuyez sur le bouton > ou < pour ajuster l'année.
3. Appuyez sur le bouton « S ». Le mois clignotera à l'écran. Appuyez sur le bouton > ou < pour ajuster le mois.
4. Répétez l'étape III pour ajuster le jour, l'heure (24 heures) et les minutes.
5. Appuyez sur le bouton « S ». « SET » clignotera à l'écran et s'éteindra.
6. Appuyez le bouton "S". « SET » clignotera à l'écran et s'éteindra.


La date et l'heure sont maintenant réglées.

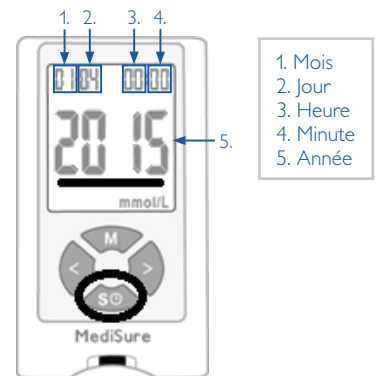


Effectuer un test



Lavez vos mains à l'eau chaude savonneuse.

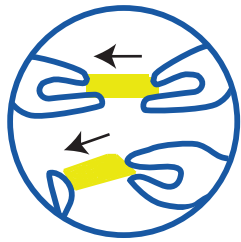

Mettre des gants et préparer une lancette à usage unique et à désactivation automatique.

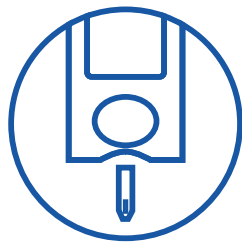

Insérez une bandelette test dans le glucomètre.




Appliquez l'échantillon sanguin. Résultats en 6 secondes !



Effectuer un protocole de nettoyage entre chaque utilisation.

Revoir les résultats en mémoire

1. Appuyez sur le bouton "M" pour activer le glucomètre. Appuyez une fois de plus sur le bouton "M"
2. Les derniers résultats de tests s'affichent. Appuyez sur > ou < pour afficher les autres résultats.
3. Appuyez sur le bouton « M » une troisième fois pour voir les moyennes pour 7, 21 et 28 jours.
4. Appuyez sur le bouton « S » pour éteindre l'appareil.

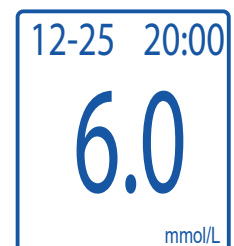

Suivez attentivement les instructions d'utilisation. Utiliser uniquement avec un autopiqueur à usage unique à désactivation automatique. Une nouvelle paire de gants propres doit être portée par l'utilisateur avant de tester chaque patient. Suivre attentivement les protocoles de nettoyage et de désinfection entre chaque utilisation.